



*We remove your
dependence imports*

ABDİ İBRAHİM

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME TEŞEKKÜR MEKTUBU

26.02.2022



Değerli tedarikçimiz **DEMİRKOL MAKİNE KALIP PLASTİK SANAYİ**

01.01.2021-31.12.2021 süreci temel alınarak yapmış olduğumuz Satış, Kalite ve Lojistik süreçlerinizi değerlendiren Tedarikçi Değerlendirme Anketimiz'den **90** gibi önemli bir puan alarak Abdi İbrahim İlaç Sanayi A.Ş. Satın Alma bölümü Tedarikçi değerlendirme süreçlerinde kayda değer bir başarı yakalamış bulunmaktadır. Bu başarınızın sürekli olması ve artarak devam etmesi ve önümüzdeki dönemlerdeki birlikteliğimize yansımaları en büyük arzumuzdur.

Değerlendirme süreci içerisindeki çalışma felsefeniz, katkılarınız ve yaklaşımınız için teşekkür eder ve iş birliğimizin bu değerler üzerinden devam etmesini temenni ederiz.

Ufuk Güler

Tedarik Zinciri ve Satınalma Direktörü

Murat Börü

Satınalma Müdürü

Serhan Ürek

Satınalma Yöneticisi

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 4 Maslak - Sarıyer 34467 İstanbul, Türkiye
T. +90 212 366 84 00
F. +90 212 276 20 20
www.abdiibrahim.com.tr

We blend our love for our business with high technology and discipline.
We are the first brand in Turkey to have its quality crowned with the
"Certificate of Appreciation" by Abdi İbrahim.

R&D, DESIGN ENGINEERING
CAD / CAM / CAE






DKL - RE200



General Technical Information

The DKL-RE200 pulverises the crushed drug pellets by reducing them to various sizes.

- Maximum granule size 23mm (interchangeable)
- Machine maximum dimensions 880 x 1430 x 1100mm
- Product feed motor (asynchronous) 2880 Rpm, 4 kW
- Product feed reducer 1:2 ratio
- Movable portable cabin

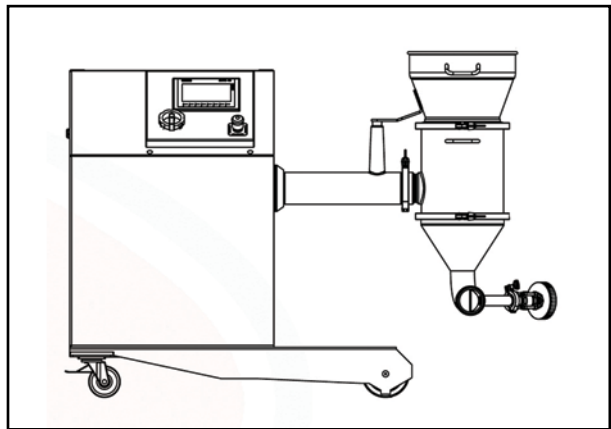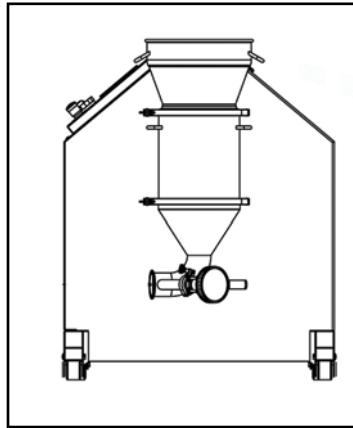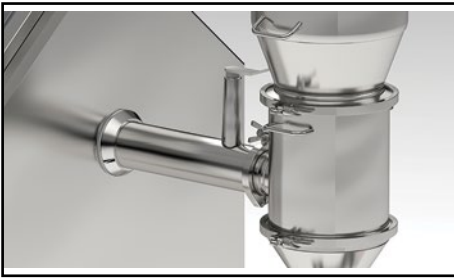

DKL - RE200



- The metals used are made of 316L stainless steel.
- The digital display has an easy-to-use interface.
- Powder drug raw material can be pulverised in different sizes with sieves with different gaps.

Grater / Sieve Machine




- The drug movement sections are connected with fasteners in a modular structure that can be disassembled and assemble
- The connection of the modular sections is provided with magnetic safety sensors.

DKL - RE200



- Cubic volume design saves space.
- It is designed in dimensions that can pass through the doors between the rooms.
- In order to realise the working conditions, granule inlet and dust outlet sections are secured with railings.

Grater / Sieve Machine

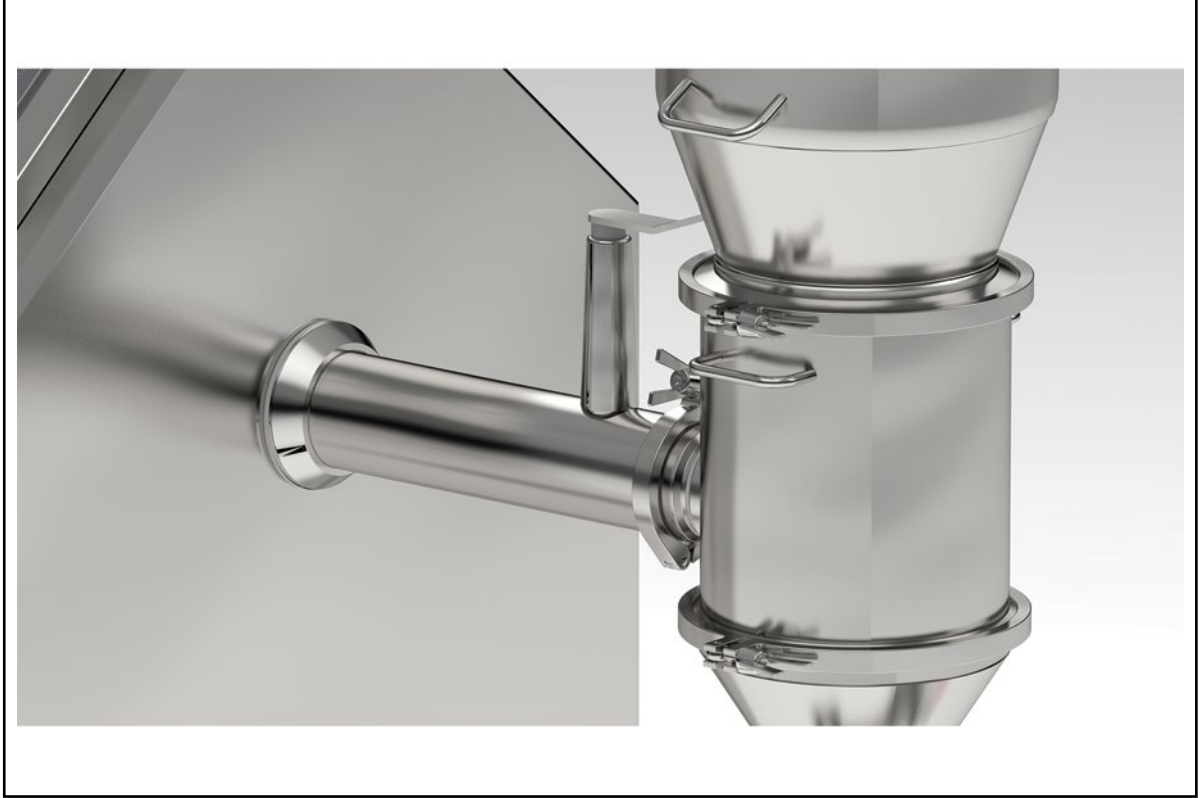

- The grater/sieve is hidden in a protected cabinet.
- The product inlet section is protected by a sensor.
- Different sizes of powder product can be obtained with removable and replaceable grater/sieve.

DKL - RE200



- The systems in the cabin and hopper are mounted with clamps and fasteners.
- Product quantity and dust size can be changed by adjusting the grater/sieve rotation speed.

Grater / Sieve Machine



- The machine can be stopped in case of emergency with the EMG button.
- The movable cabin can be operated safely and stably with lockable wheels.
- Limited access to the engine compartment is provided with the keyed cab cover.

R&D DESIGN ENGINEERING

CAD / CAM / CAE

